


# REVLINE RL 150

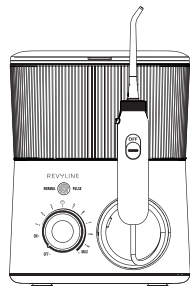

## Стационарный ирригатор для полости рта

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крышка-пенал для хранения четырех насадок



Резервуар

Насадка

Кнопка блокировки насадки

Рукоятка


Кнопка on/off

Корпус прибора


Режимы работы

Детская чистка


Регулятор давления струи

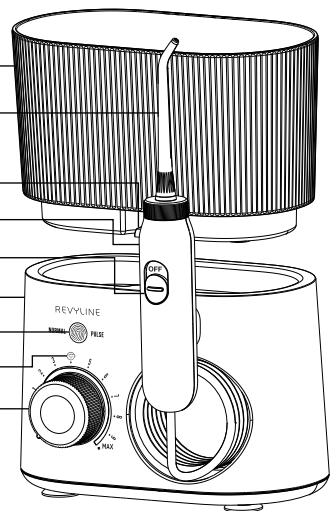

Фильтр

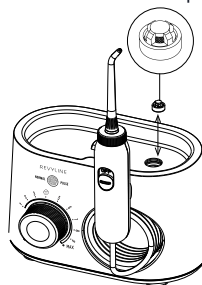

Ножки на присосках

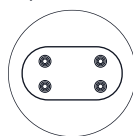

Разъем питания



### Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

### Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора RL 150 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намокания кабеля.
2. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.
8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

### Предупреждения медицинского характера

- Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

- Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили имплантаты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.
- Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

### Эксплуатация устройства

Перед подключением ирригатора к сети убедитесь, что вы используете оригинальный исправный блок питания, после чего один конец шнура соедините с разъемом, который находится в нижней части прибора. Далее вставьте штепсельную вилку, к которой крепится второй конец шнура, в розетку.



Блок питания является универсальным (прибор можно использовать в любой стране мира).

### Насадки в комплекте

В базовой комплектации стационарного ирригатора RL 150 4 сменные насадки:



Стандартная насадка для регулярного использования.



Пародонтальная насадка с резиновым наконечником для очищения десневых карманов.



Ортодонтическая насадка для ухода за брекетами и другими ортосистемами.




Насадка для очищения поверхности языка.

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

### Установка и замена насадки


Установите насадку в разъем, расположенный наверху рукоятки, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из рукоятки.

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

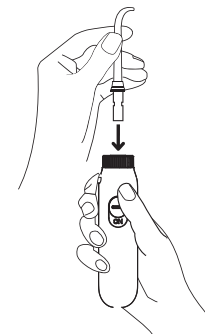


### Установка и снятие резервуара для жидкости

Снимите крышку резервуара и сам резервуар с корпуса прибора. Наполните резервуар водой. Далее установите резервуар на корпус ирригатора и закройте его крышкой. Устанавливая резервуар, следите за тем, чтобы отверстие для подачи воды плотно соединилось с гнездом, где находится фильтр. Если вы все сделали правильно, вода беспрепятственно будет поступать в ручку.

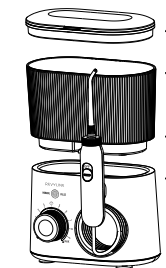

Если в процессе эксплуатации вы обнаружили, что вода стала поступать плохо, скорее всего причина в том, что засорился фильтр. Чтобы его прочистить, снимите резервуар и с помощью пинцета достаньте фильтр из гнезда, которое расположено в корпусе ирригатора. Промойте фильтр и установите его обратно.

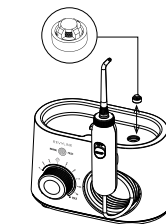

### Примечание:

В резервуаре вы можете заметить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.

### Наполнение резервуара

Заливайте в резервуар очищенную воду, температура которой не выше +40°C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.



### Включение и выбор режима работы

Для включения прибора регулятор мощности давления поверните по часовой стрелке до щелчка (положение ON).

Стационарный ирригатор RL 150 позволяет использовать 20 вариантов чистки, включая детский.

Для выбора мощности напора водной струи используйте регулятор давления: по часовой стрелке – для увеличения, против – для уменьшения. Выберите для себя наиболее комфортный уровень давления.

Перед началом ирригации, переведите переключатель на ручке прибора в положение ON (жидкость начнет поступать в ручку и насадку, образуя водную струю).


По окончании ирригации переведите переключатель на ручке прибора в положение OFF, предварительно провернув регулятор мощности давления влево до щелчка (положение OFF).

Для выбора режима работы (NORMAL или PULSE) при включенном приборе коснитесь сенсорной кнопки с изображением отпечатка пальца, которая находится над регулятором давления. Режим NORMAL предназначен для стандартной чистки, режим PULSE – для осуществления массажа десны.

Если в процессе ирригации вам на непродолжительное время требуется приостановить подачу воды, переведите переключатель на ручке в положение OFF.

**Внимание!** На начальных этапах эксплуатации прибора рекомендуется использовать его на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

### Встроенный таймер

 Прибор оснащен автоматическим таймером. Отключение происходит через 3 минуты.

### Режим ирригации

- Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.
- После завершения ирригации отключите прибор от сети.

**! Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!**

### Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха.

### Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

### Уход и обслуживание

Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.

Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их устранения используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

### Гарантия

#### Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

#### Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному

источнику питания.

- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.

На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

### Распространенные проблемы и их решение

#### Не извлекается насадка

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

#### Сложности выбора уровня напора струи

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

#### Кровоточивость во время ирригации

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии с поверхности десен. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

#### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE Модель: RL 150

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

2 режима работы: Normal, Pulse

10 уровней давления, включая детский (210–860 кПа)

Частота пульсации: 1400–1800 в мин.

Питание – от сети переменного тока 100–240 V, 50/60 Hz (автоматическая подстройка под сетевое напряжение)

Уровень влагозащиты: IPX4

Емкость резервуара: 600 мл

Потребляемая мощность: 20 Вт

Материал корпуса: ABS-PC

Гарантия: 2 года

Средний срок службы: 5 лет

Хранить при комнатной температуре

### Комплектация

Основной блок ирригатора


4 сменные насадки в крышке-пенале

Съемный блок питания

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

 8 (800) 775-38-49

 [www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)