


# REVYLINE

## RL 620

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР  
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

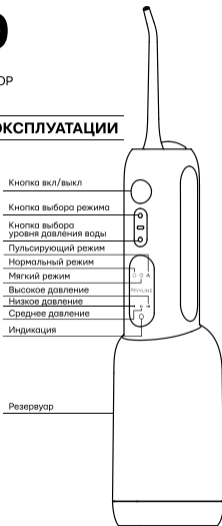

### ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым применением ирригатора Revyline RL 620 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
3. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть.
4. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
5. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
11. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
12. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
13. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
14. Использование ирригатора детьми возможно только под присмотром взрослых.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект. Во время зарядки прибора индикатор мигает зеленым. При полной зарядке индикатор горит синим. Если индикатор мигает красным, значит аккумулятор разряжается.

При первом использовании прибора аккумулятор необходимо зарядить полностью.

Время полной зарядки – 4 часа.

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

### ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Устройство работает в трех режимах:

- Нормальный – предназначен для регулярного использования, эффективно удаляет остатки пищи и бактериальный налет из межзубных промежутков и с поверхности зубов.
- Мягкий – подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен.
- Пульсирующий – обеспечивает гидромассаж десен, улучшает кровообращение в тканях.

Выбор осуществляется с помощью кнопки режимов.

Прибор может работать с различными уровнями давления. В каждом режиме работы 3 уровня интенсивности. Выбор интенсивности осуществляется с помощью кнопки уровня давления.

При последующем включении ирригатор будет работать в том режиме и с той интенсивностью, которые были выбраны перед отключением прибора.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

При использовании резервуара емкостью 150 мл потяните резервуар для воды вниз до упора. Убедитесь, что он выдвинут до конца во избежание подтеков жидкости.

При использовании резервуара емкостью 280 мл вставьте верхнюю часть в резервуар с помощью кнопки разблокировки резервуара.

**Наполнять резервуары водой можно двумя способами:**

1. Извлеките верхнюю часть из самого резервуара, наполните резервуар водой, затем установите верхнюю часть прибора на резервуар. 2. Откройте заглушку резервуара, залейте в резервуар воду. Заполните емкость, закройте резервуар заглушкой. Нажмите кнопку ONN/OFF и приступите к процедуре ирригации. Для выключения ирригатора нажмите кнопку ONN/OFF повторно.

### УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

### РЕЖИМ ИРРИГАЦИИ

Расположите насадку под углом 45 градусов на расстоянии 1-2 мм от поверхности зубов. Включите ирригатор и направьте струю на область чистки. Продвигайте насадку вдоль линии десен, задерживая ее в межзубных промежутках. Для получения наилучших результатов сначала обработайте поверхность боковых зубов, а затем – передних. Держите рот прикрытым во избежание разбрызгивания воды. Вода должна естественным образом вытекать из полости рта в раковину.

### После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите прибор.



## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ИРРИГАТОРА

Ирригатор Revyline RL 620 с резервуаром на 150 мл удобно использовать в поездках. Для удобства хранения и транспортировки конструкция прибора позволяет уменьшить его габариты: надавите на верхнюю выдвижную часть резервуара, чтобы сложить его.

**Внимание!** Перед тем как подготавливать ирригатор к дороге или длительному хранению, необходимо протереть все детали устройства сухой салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производится согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не погружайте устройство в воду.
- Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.
- Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

**Внимание!** Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

## НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации прибора 4 насадки.

После 3–6 месяцев регулярного использования насадки рекомендуется менять из соображений гигиены.

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с не устраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

## РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

### Не извлекается насадка

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку разблокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

### Сложности выбора уровня напора струи

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта.

### Кровоточивость во время ирригации

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии с поверхности десен. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора Revyline RL 620.
- Стандартная насадка – 1 шт.
- Пародонтальная насадка – 1 шт.
- Ортодонтическая насадка – 1 шт.
- Насадка для чистки языка – 1 шт.
- Выдвижной резервуар емкостью 150 мл.
- Резервуар емкостью 280 мл.
- Кабель USB Type-C.
- Инструкция по эксплуатации.

## ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

- Модель: RL 620.
- Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.
- Уровень давления воды: от 400 до 800 кПа.
- Частота пульсации: от 1400 до 1800 в мин.
- Режимы работы: 3 (нормальный, мягкий, пульсирующий).
- Емкость резервуаров: 280 мл и 150 мл.
- Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик).
- Влагозащита: IPX7.
- Питание: литиевый аккумулятор 1400 mAh.
- Потребляемая мощность: 5 Вт.
- Постоянный ток: 5 В.
- Сила тока: 1 А.
- Время полной зарядки аккумулятора: 4 часа.
- В режиме ожидания прибор держит заряд до 180 дней.
- В рабочем состоянии заряда хватает на 35–80 минут (в зависимости от уровня интенсивности давления).
- Габариты прибора с резервуаром 150 мл: 43x53x224 мм (в рабочем состоянии без насадки).
- Габариты прибора с резервуаром 150 мл: 43x53x154 мм (в сложенном состоянии без насадки).
- Габариты прибора с резервуаром 280 мл: 57x73x224 мм (в рабочем состоянии без насадки).
- Вес: 246 г.
- Уровень шума: 75 dB.
- Товар не имеет срока годности.
- Средний срок службы: 5 лет.
- Гарантия: 2 года.
- Хранить при комнатной температуре.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.  
+7(800)775-38-49 | [www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____	Произведено по заказу ИП Паршунина С.Г.: Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, мкр.1, д.18  Изготовлено: Shenzhen BFT Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.-26/F Tower One Time Square 1 Matheson Street Causeway Bay HK
Дата продажи _____	
Место для печати	